


PerioAssistant4 / PerioAssistant3 の出血歯面数の合計が合わない

PerioAssistant4（または PerioAssistant3）で詳細入力をした際、出血歯面数の合計が合わない場合があります。


以下の手順よりフィールドの定義を修正してください。

注) 作業前には必ずデータのバックアップをお取りください。ここでの説明は PerioAssistant4.fp7, FileMakerPro 10 を使用しています。他のバージョンをご使用の場合は読み替えてください。


- ① PerioAssistant4.fp7 を開きます。ファイル→管理（または定義）→データベースを選択します。

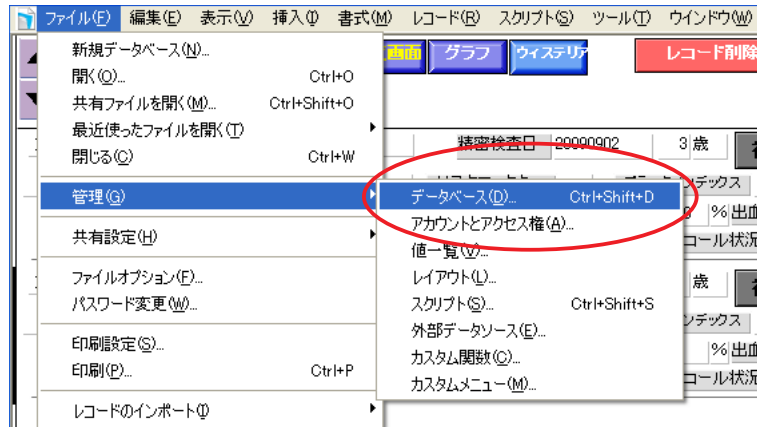

- ② フィールドタブをクリックし、「B 歯面数 6 点法 8 歯は除く」を選択反転させ、「オプション」をクリックします。

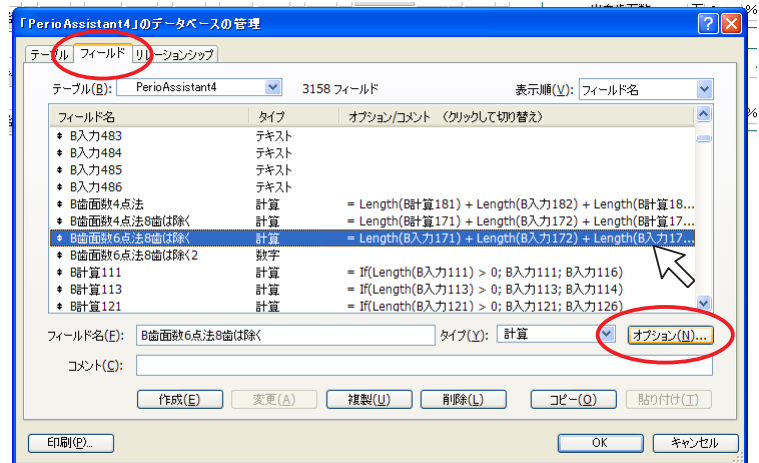

- ③ 計算式の設定ダイアログが開きます。下の枠内の計算式が見にくい場合は右下をドラックして見やすくなるまでダイアログを大きくします。

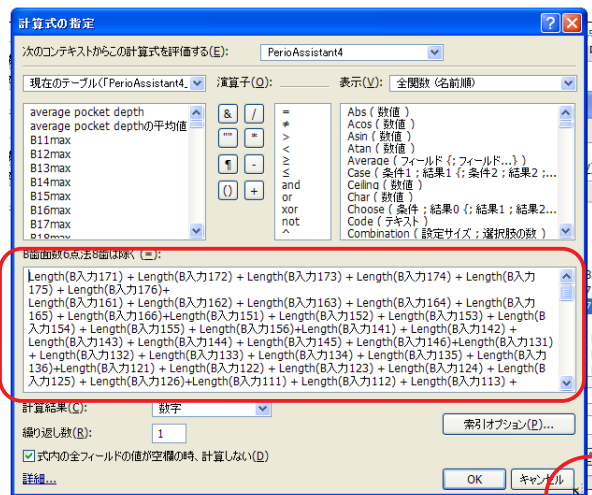

右下角にカーソルをもってくるとカーソルが \ になりますので、見やすくなるまでナメ横にドラックして広げます。

