



## ウイステリア Pro3.0 修正マニュアル

〈歯周病画面〉のプロービングの深さ、出血面数を入力し、そのまま（他の場所をどこもクリックせずに）「データ登録」ボタンを押すと、PerioAssistant に計算された値が転送されません。（割合の%が計算されないまま転送されます）  
下記の要領で修正してください。



- ① スクリプトの定義を開き、「ペリオアシスタントに初診データ転送」を選び、編集をクリック。

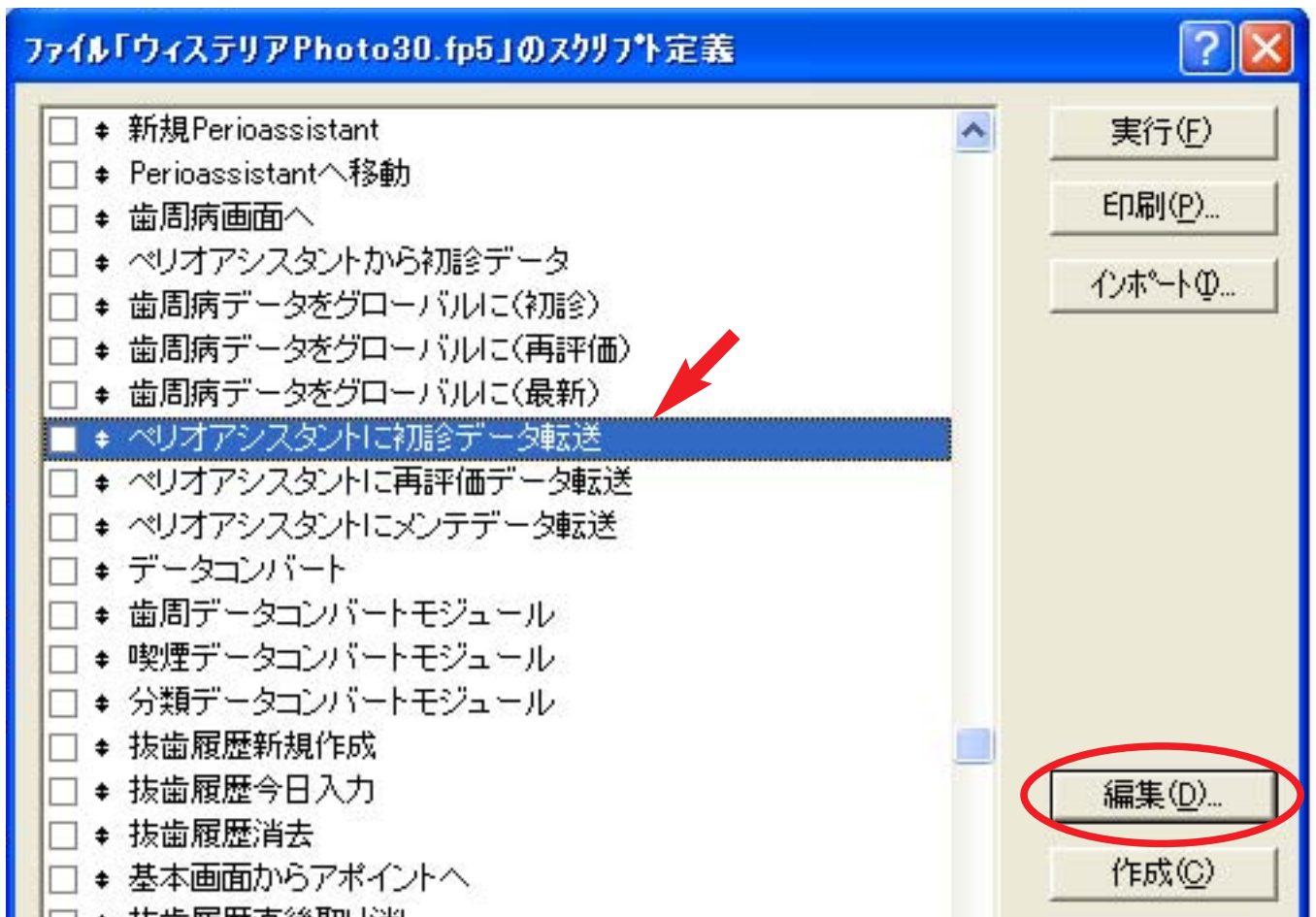


- ② 左のスクリプト一覧から「レイアウト切り替え」を選び「移動 (M)」をクリックして右側の一番上の行に挿入します。

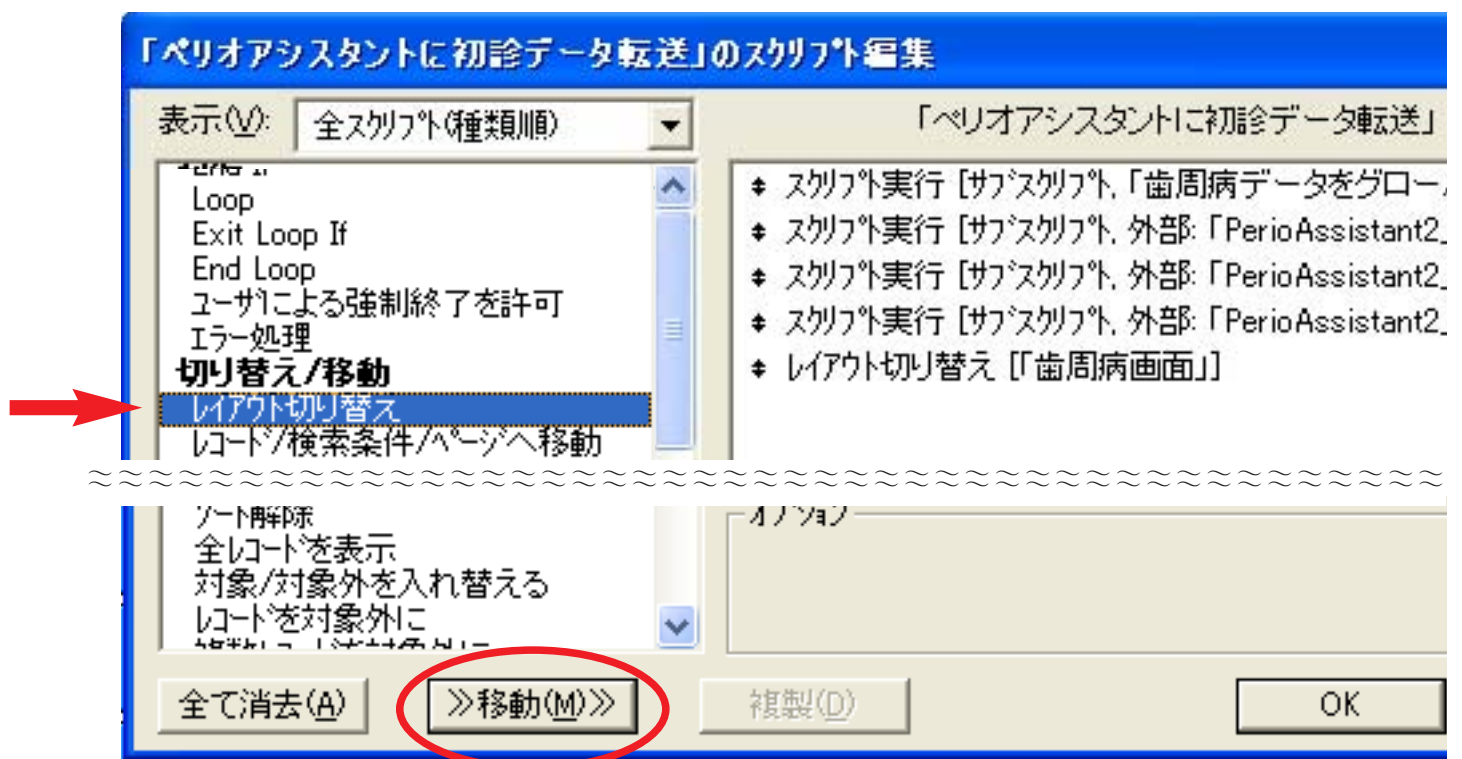

③ オプション指定 (S) に「歯周病画面」を選択し、「OK」します。

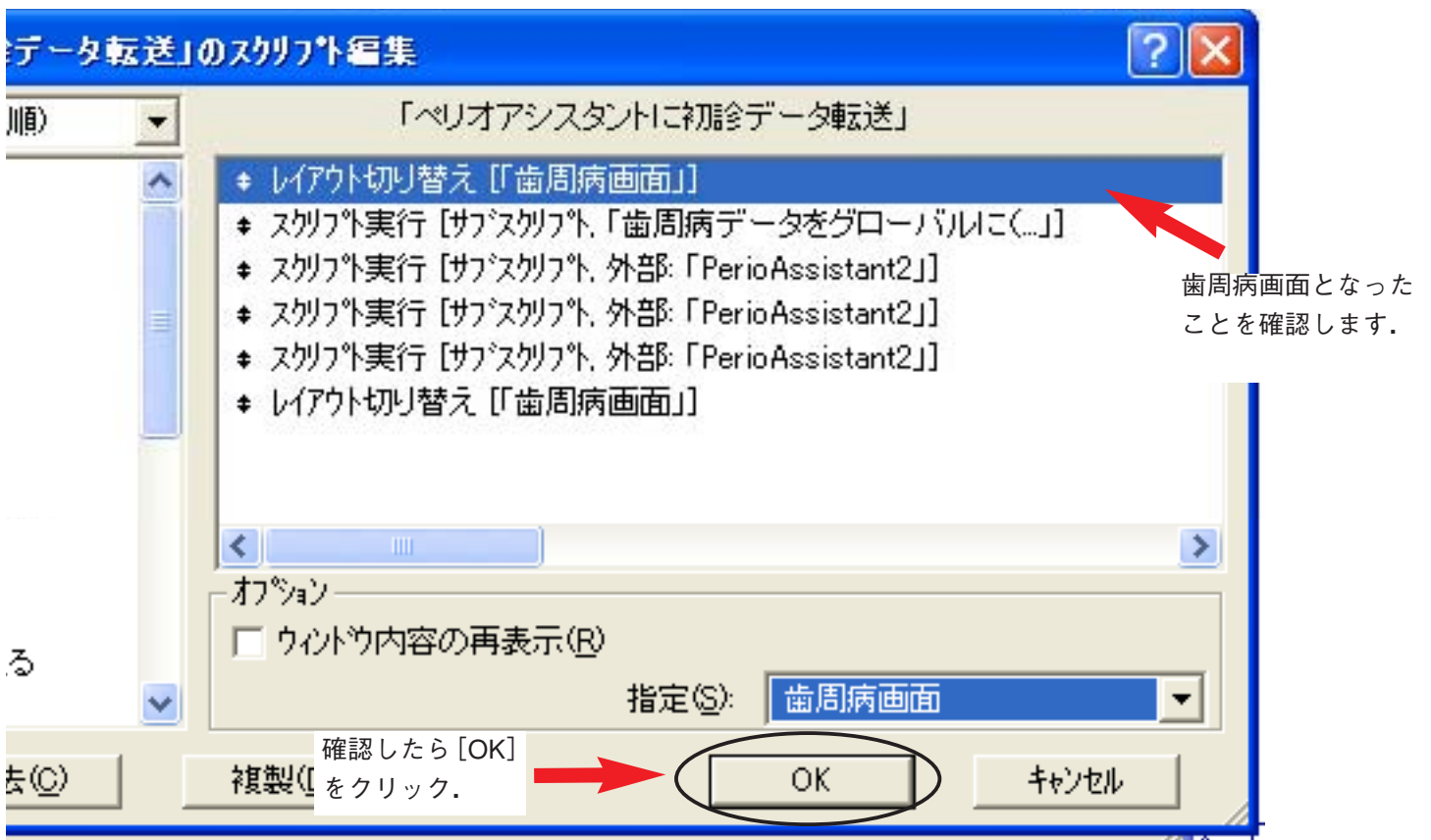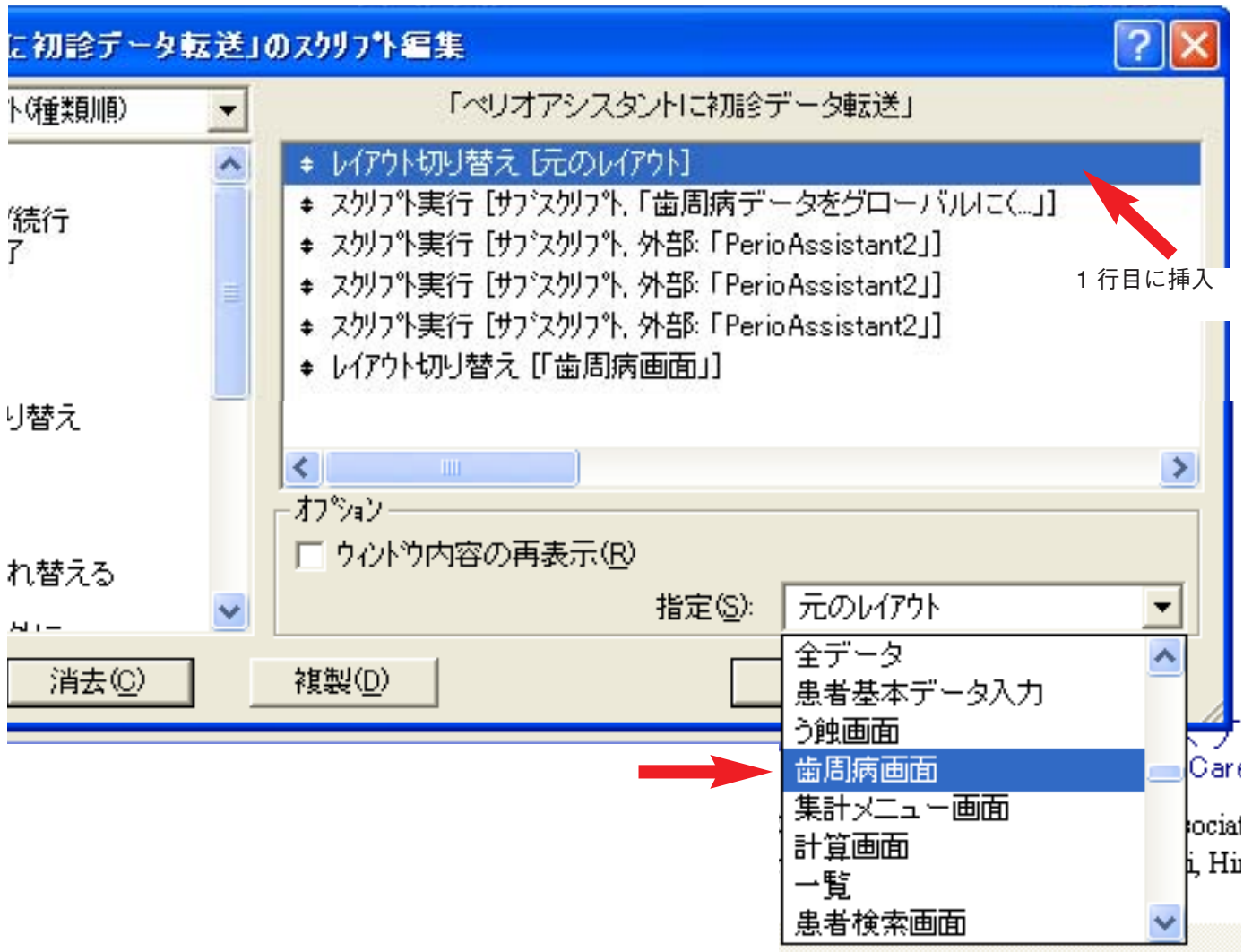

④ 同様に「ペリオアシスタントに再評価データ転送」「ペリオアシスタントにメンテデータ転送」にも ②, ③ を繰り返してそれぞれのスクリプトに一行挿入します。

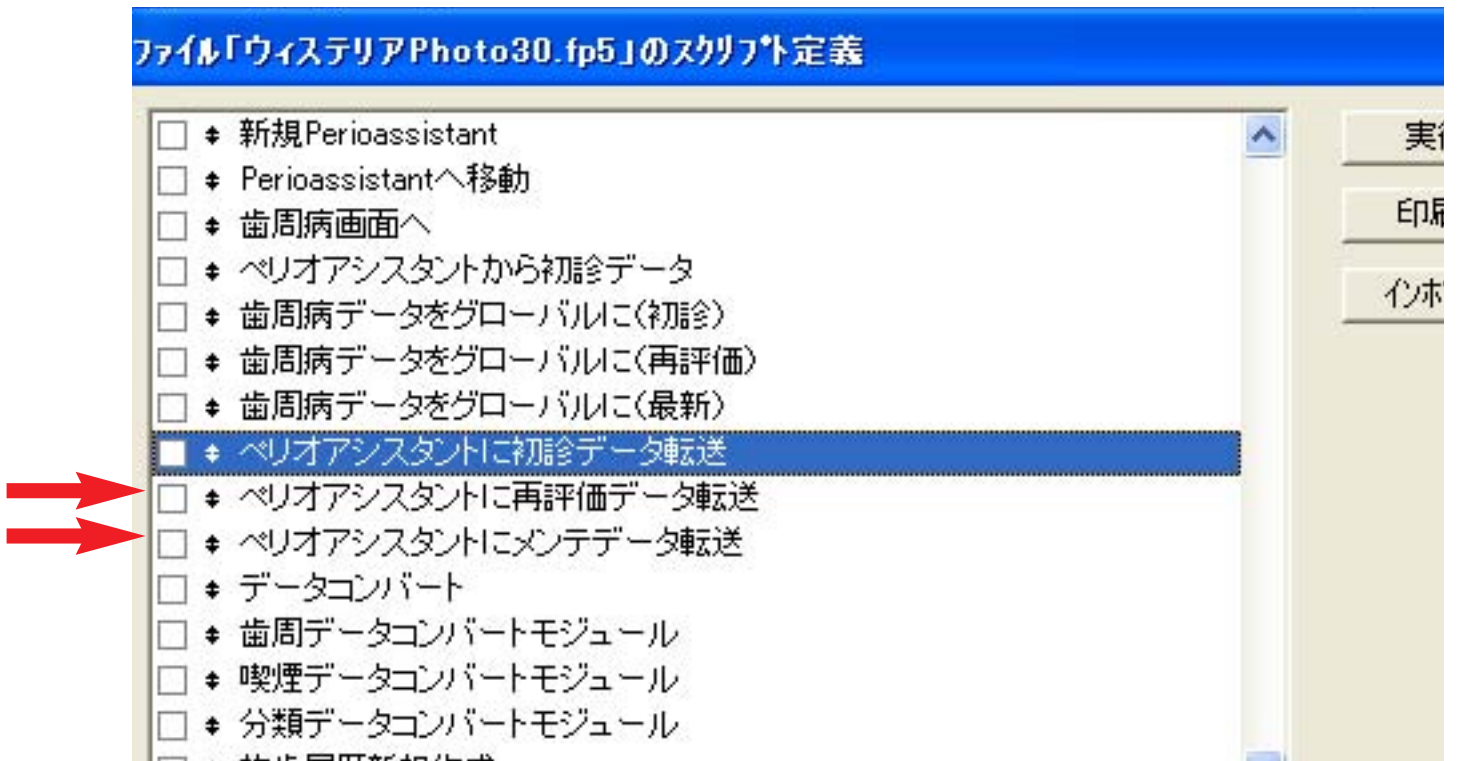

⑤ 全てを修正したら、「終了」をクリックしスクリプトの定義を閉じます。

