



PerioAssistant の「詳細入力画面」で左上 6 番類側の出血点チェックボックスが、一度チェックを入れると、再度クリックしてもチェックがはずれない状態になっています。

下記の要領で修正してください。


1. PerioAssistant でスクリプト定義を開きます。

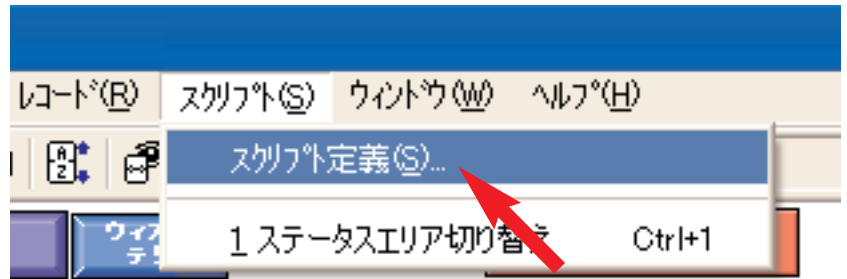


2. 「UL6BBOP 入力」を選び [編集] をクリック。

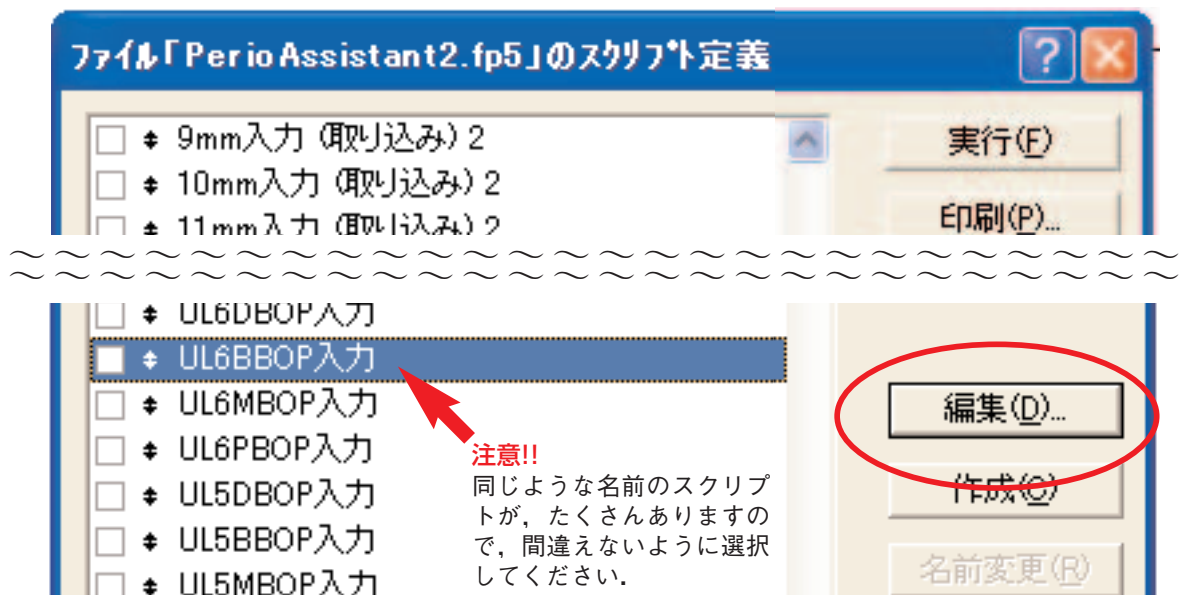

3. 「UL6BBOP 入力」のスクリプト編集画面が表示されますので、左側の窓の一行目を選択し、[指定] をクリック。

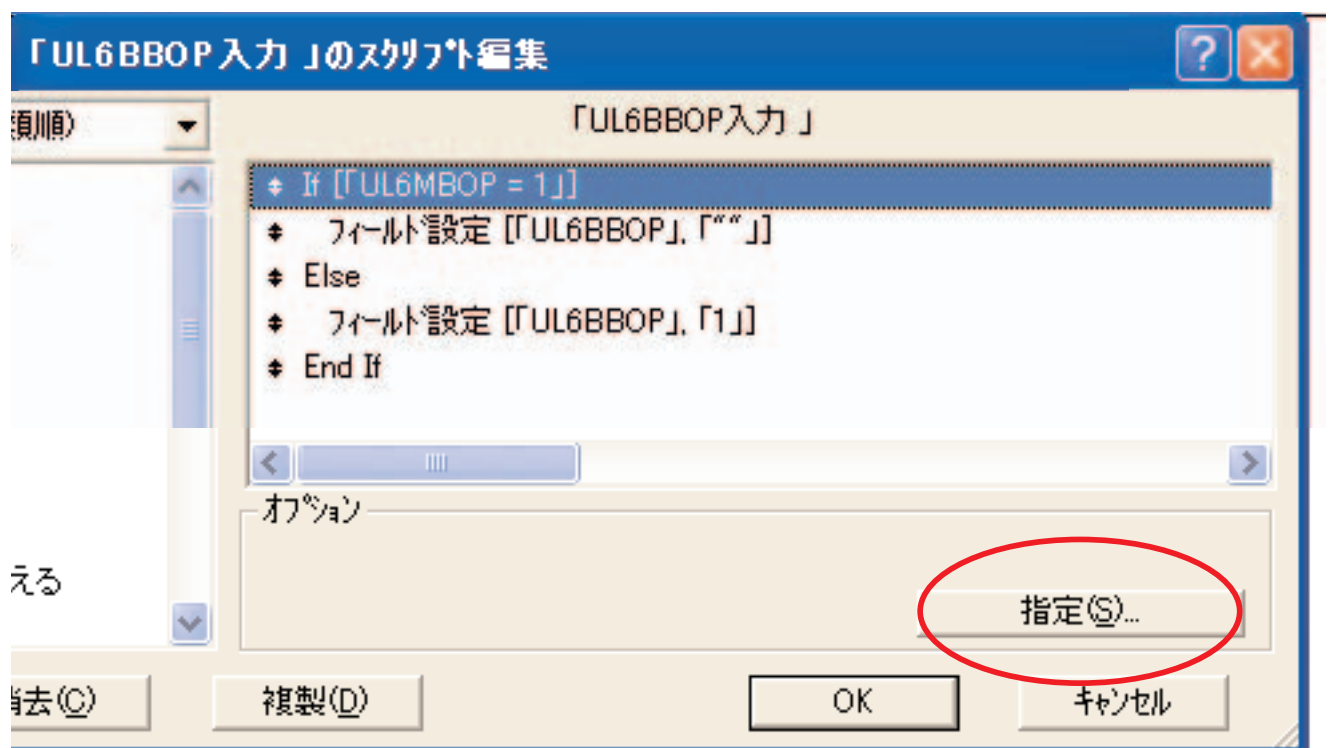

4. 計算式の指定の下側の窓に表示されている「UL6MBOP = 1」を「UL6BBOP = 1」に修正し、[OK] します。

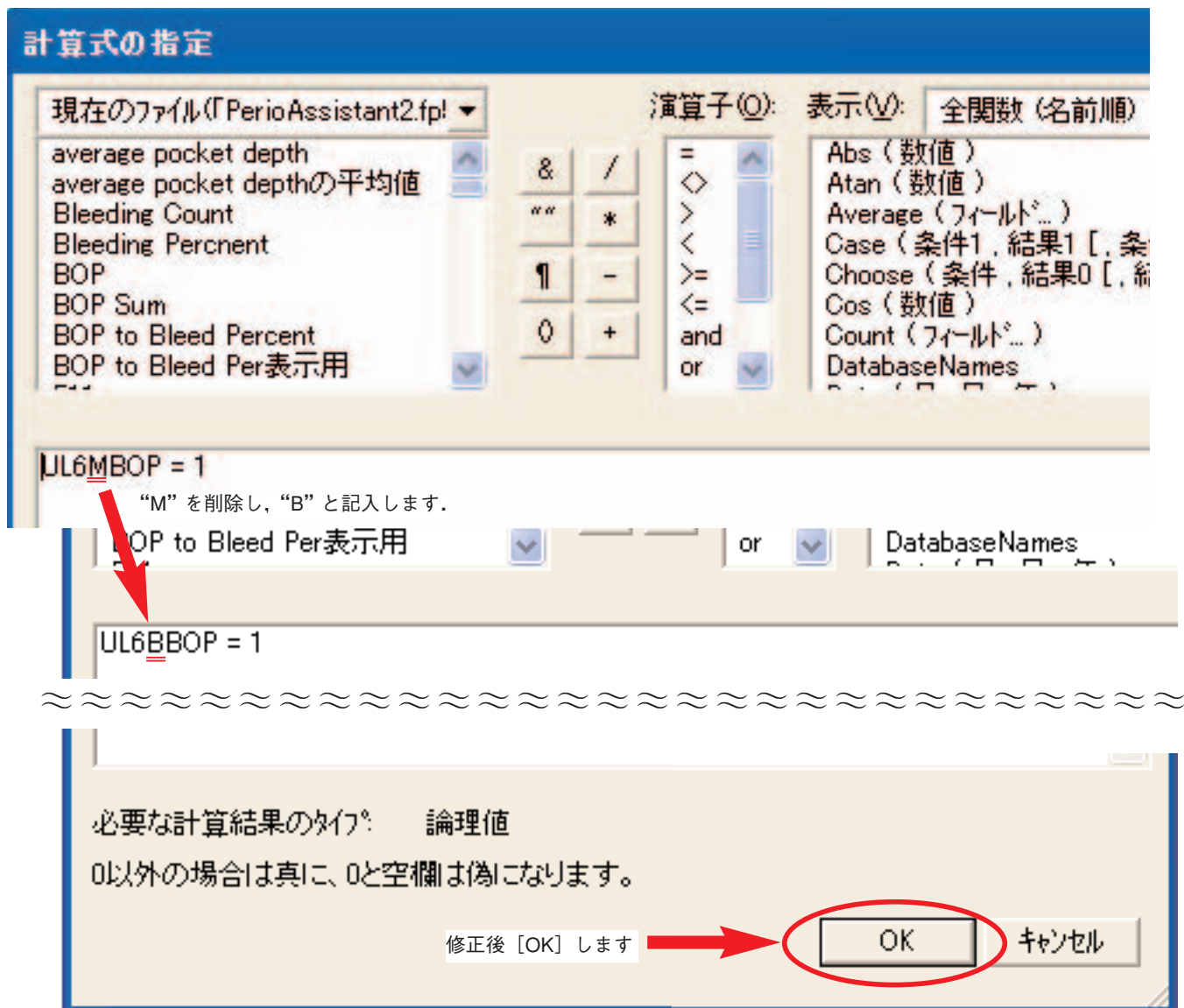

計算式の指定

現在のファイル(「PerioAssistant2.fp」)

演算子(O): 表示(V): 全関数(名前順)

average pocket depth
average pocket depthの平均値
Bleeding Count
Bleeding Percnent
BOP
BOP Sum
BOP to Bleed Percent
BOP to Bleed Per表示用

UL6MBOP = 1

“M”を削除し，“B”と記入します。

BOP to Bleed Per表示用 or DatabaseNames


UL6BBOP = 1

必要な計算結果のタイプ: 論理値
0以外の場合には真に、0と空欄は偽になります。

修正後 [OK] します

OK キャンセル

5. 「UL6BBOP 入力」スクリプト編集に戻りますので、[OK] し、スクリプトの定義の画面を [終了] します。
これで修正は完了です。

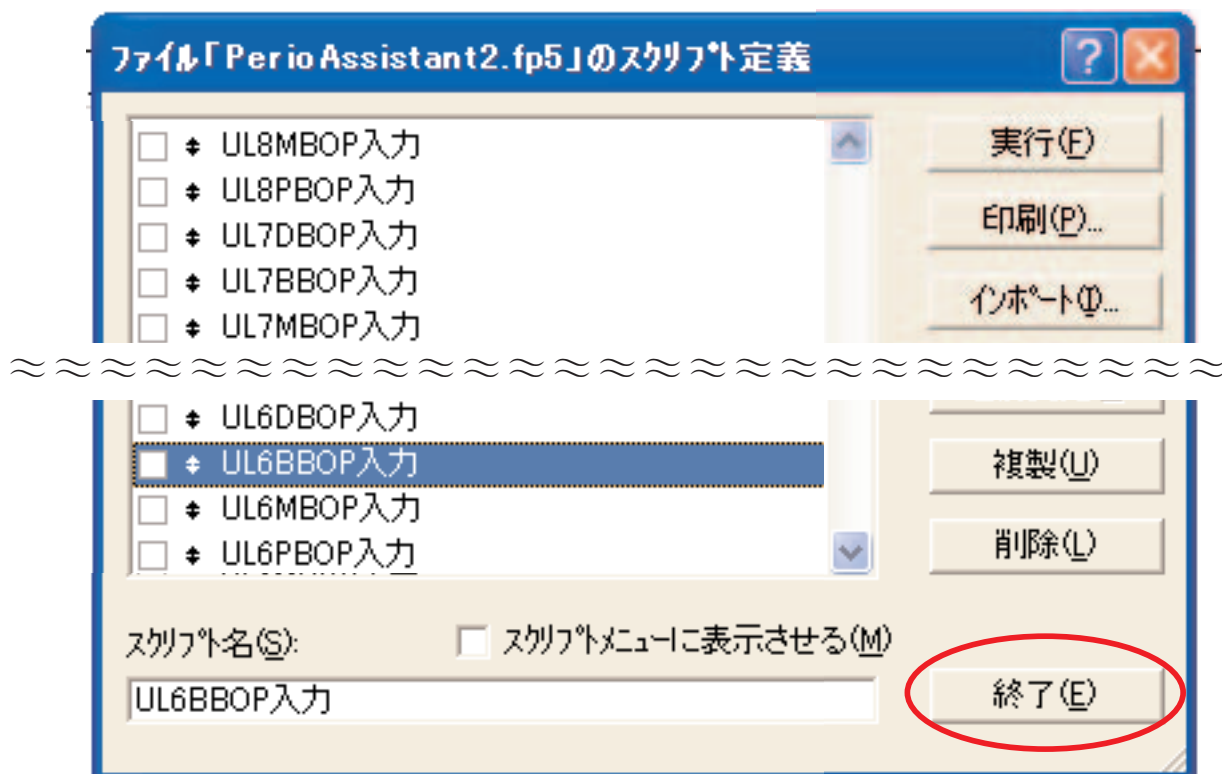

ファイル「Perio Assistant2.fp5」のスクリプト定義

UL8MBOP入力
 UL8PBOP入力
 UL7DBOP入力
 UL7BBOP入力
 UL7MBOP入力

実行(E)
印刷(P)...
インポート(O)...

UL6DBOP入力
 UL6BBOP入力
 UL6MBOP入力
 UL6PBOP入力

複製(U)
削除(L)

スクリプト名(S): スクリプトメニューに表示させる(M)
UL6BBOP入力

終了(E)