

ウイステリア Pro3.1.1 (修正マニュアル)


現象：9枚画像の拡大画面の「今日の日付」「撮影日」の表示が正しくない

修正方法：

- ① 「う蝕画面」または「歯周病画面」から「画像9」ボタンをクリックし、画像下の「拡大ボタン」をクリックします。
- ② ツールバー「表示」→「レイアウトモード」を選択します。
- ③ 「今日の日付」フィールドをクリックして選択し、ツールバー「書式」→「日付」を選びます。



- ④ 「今日の日付」の日付書式ダイアログがひらきますので、カスタム欄の「1」「2」「3」「4」を「年」「月」「日」「なし」にそれぞれ変更し、[OK] します。

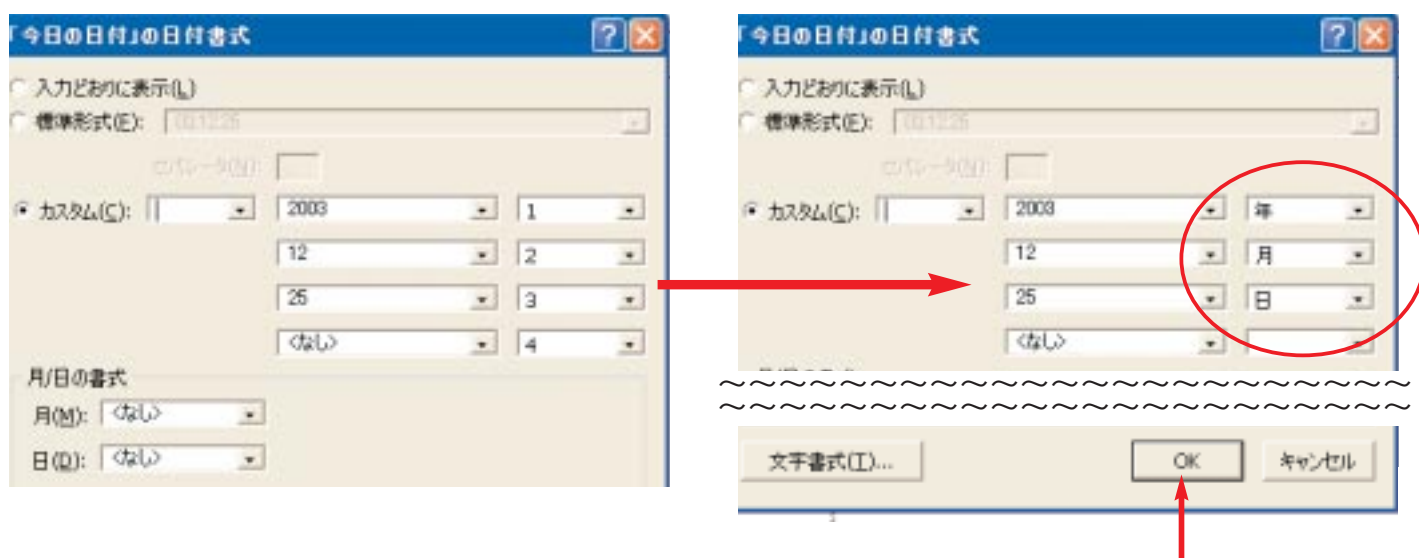

- ⑤ 同様に「撮影日表示」のフィールドも修正します。
- ⑥ 「今日の日付」「撮影日」の修正ができましたら、「表示」→「ブラウズモード」を選択します。レイアウト変更保存のダイアログボックスが表示されますので、「保存」をクリックして修正完了です。