



「う蝕」のチャート表示画面内のサリバテスト検査の最新欄の日付が、最新検査日ではなく3回目検査日が表示される。

サリバテスト検査日最新日付表示の修正

1. ウイステリアを立ち上げ、「う蝕」からチャート画面を表示させます。
2. メニューバーの「表示」からレイアウトモードに切り替えます。

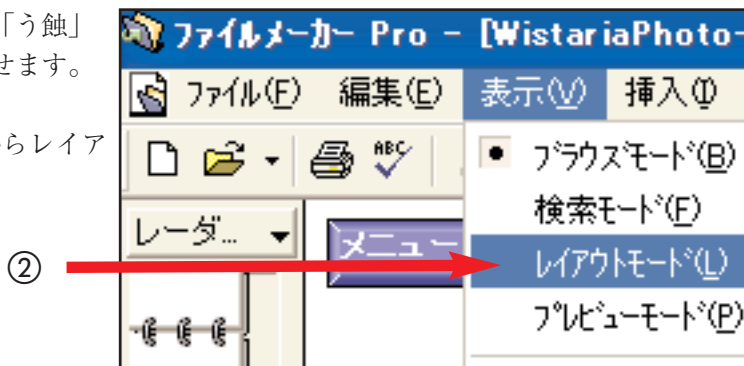


3. チャートの下にあるサリバテスト検査データ一覧表の、左下隅の「サリバ検査日 3」というフィールドをダブルクリックします。

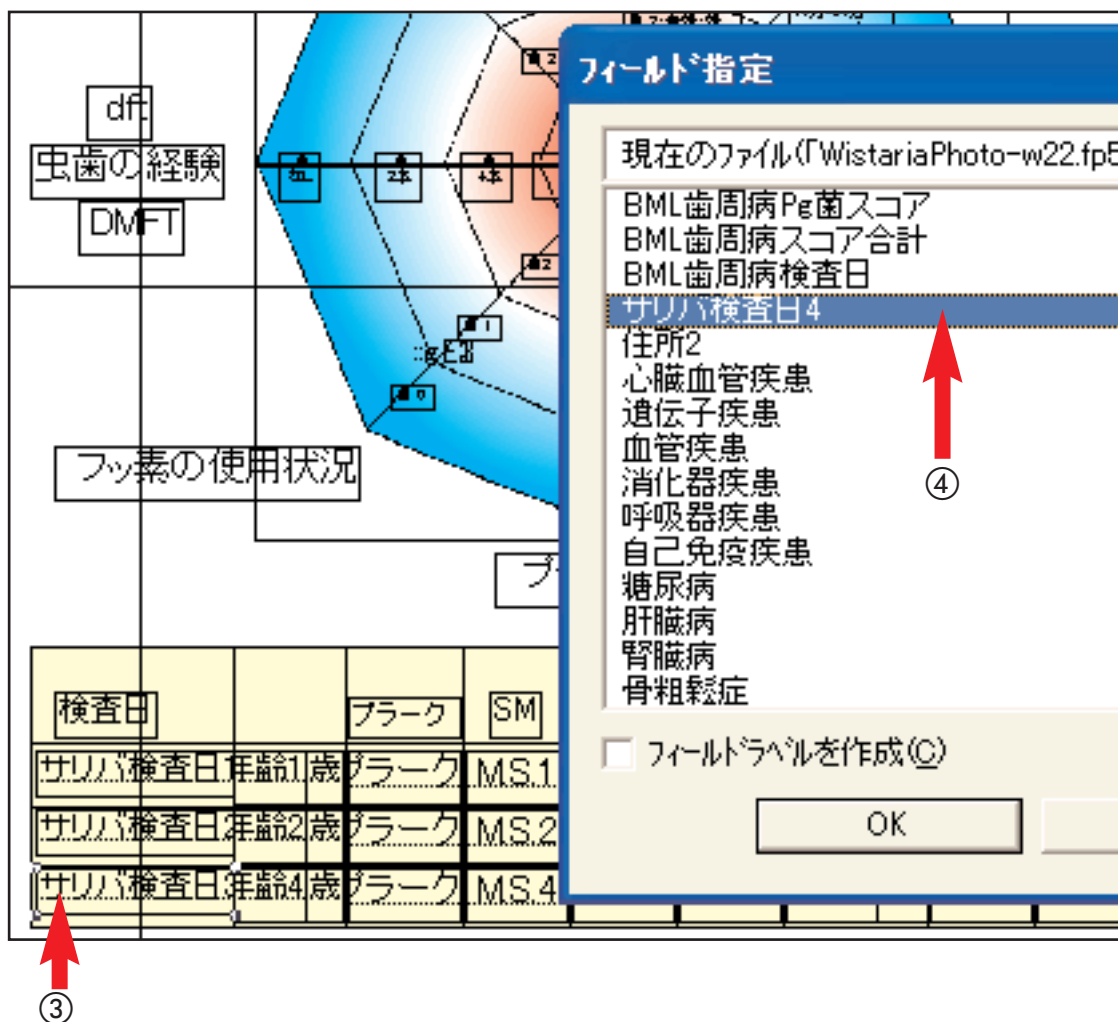


4. 「フィールド指定」のダイアログが表示されますので、画面をスクロールして「サリバ検査日 4」を探し、クリック（反転）し、「OK」をクリックしてください。

※ 4. の作業をする際、似通ったフィールド名がたくさんありますので、「サリバ検査日 4」を間違いなく選択してください。


5. メニューバーの「表示」から「ブラウズモード」に切り替え、修正完了です。

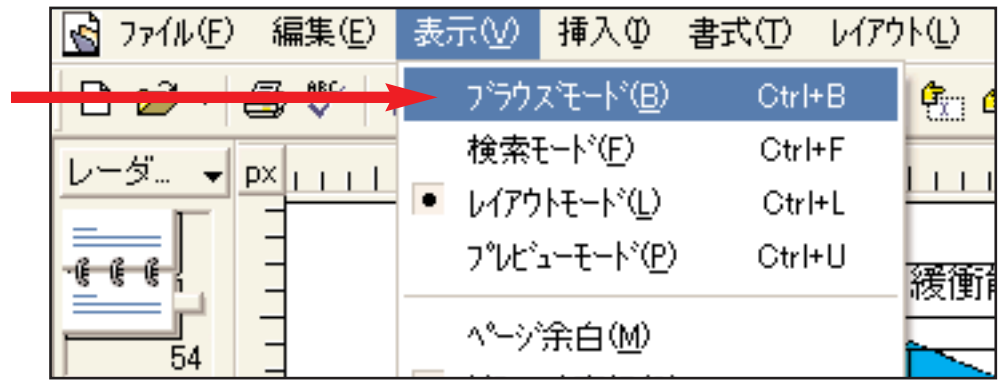

6. 同様に「う蝕」印刷画面の訂正をします。
レイアウトモードに切り替え、レイアウト選択メニューから「レーダーチャート（齲蝕）印刷」を選択します。
後の手順は上記と同じです。

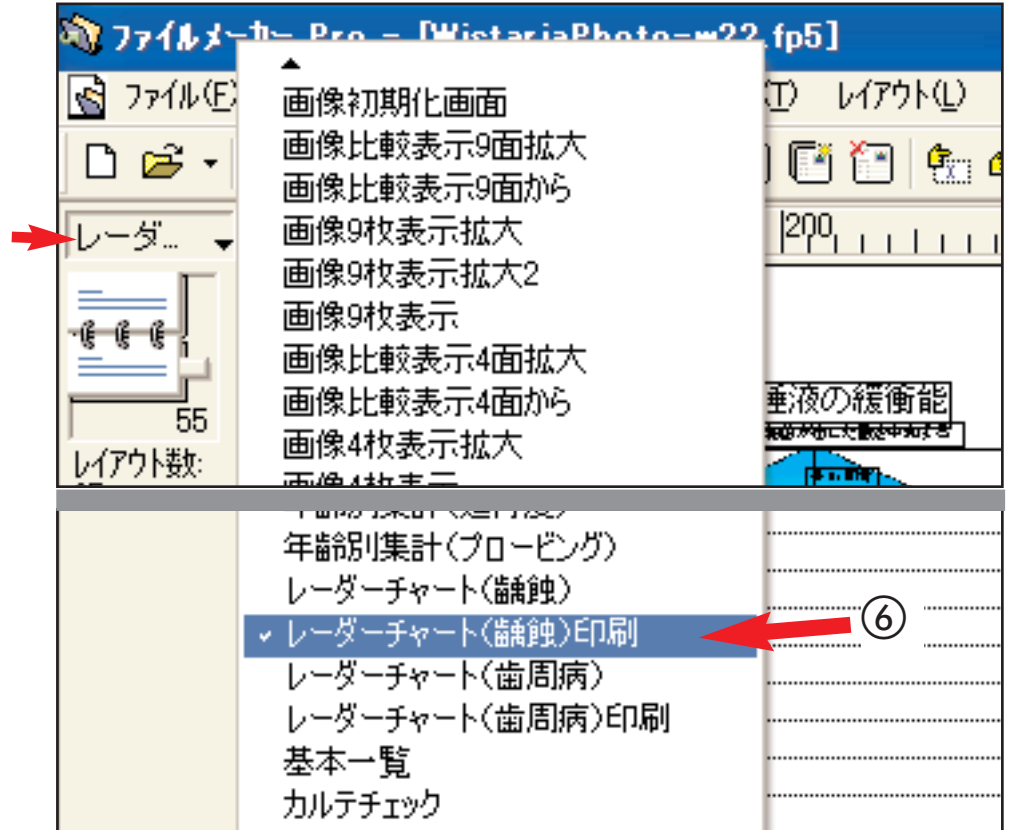

7. 「レーダーチャート（齲蝕）評価作成」画面の訂正をします。
手順6と同様にレイアウト選択メニューから「レーダーチャート（齲蝕）評価作成」を選びます（印刷レイアウトより下方にあります）。
チャート右上の検査日「最新」および「一覧表の3行目」を「サリバ検査日4」に訂正します。

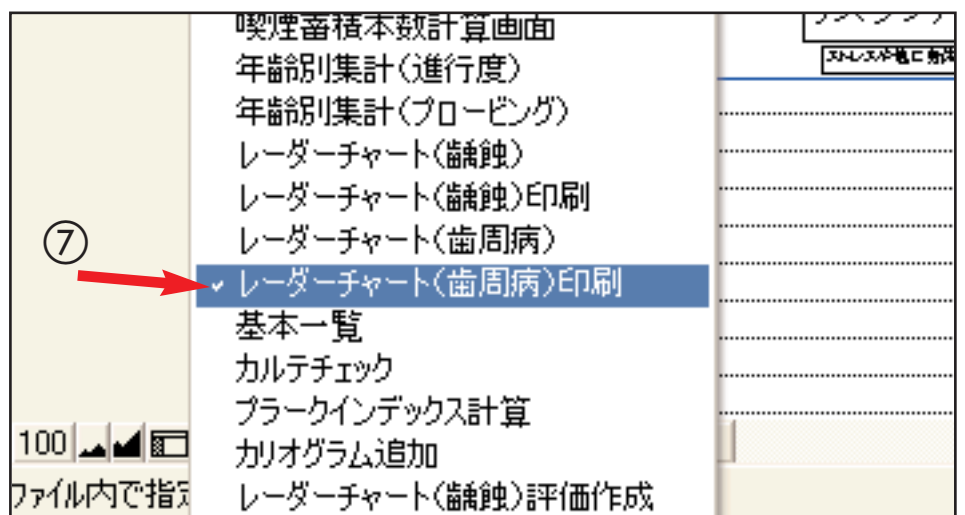

作業が終了したら「ブラウズモード」に戻します。